


# 「吸入指導箋」の発行について

病院と保険調剤薬局の間で治療に必要な情報を交換・共有し、患者さんを中心に連携して有効で安全な吸入療法を行うため当院では、名古屋南部地区薬剤師会・同地区主要病院の協力を得て統一吸入指導箋による吸入指導連携を開始しました。「院外処方箋」とともに「吸入指導箋」を提出された患者さんへ吸入指導のご協力をお願いします。

## 《吸入指導箋の流れ》

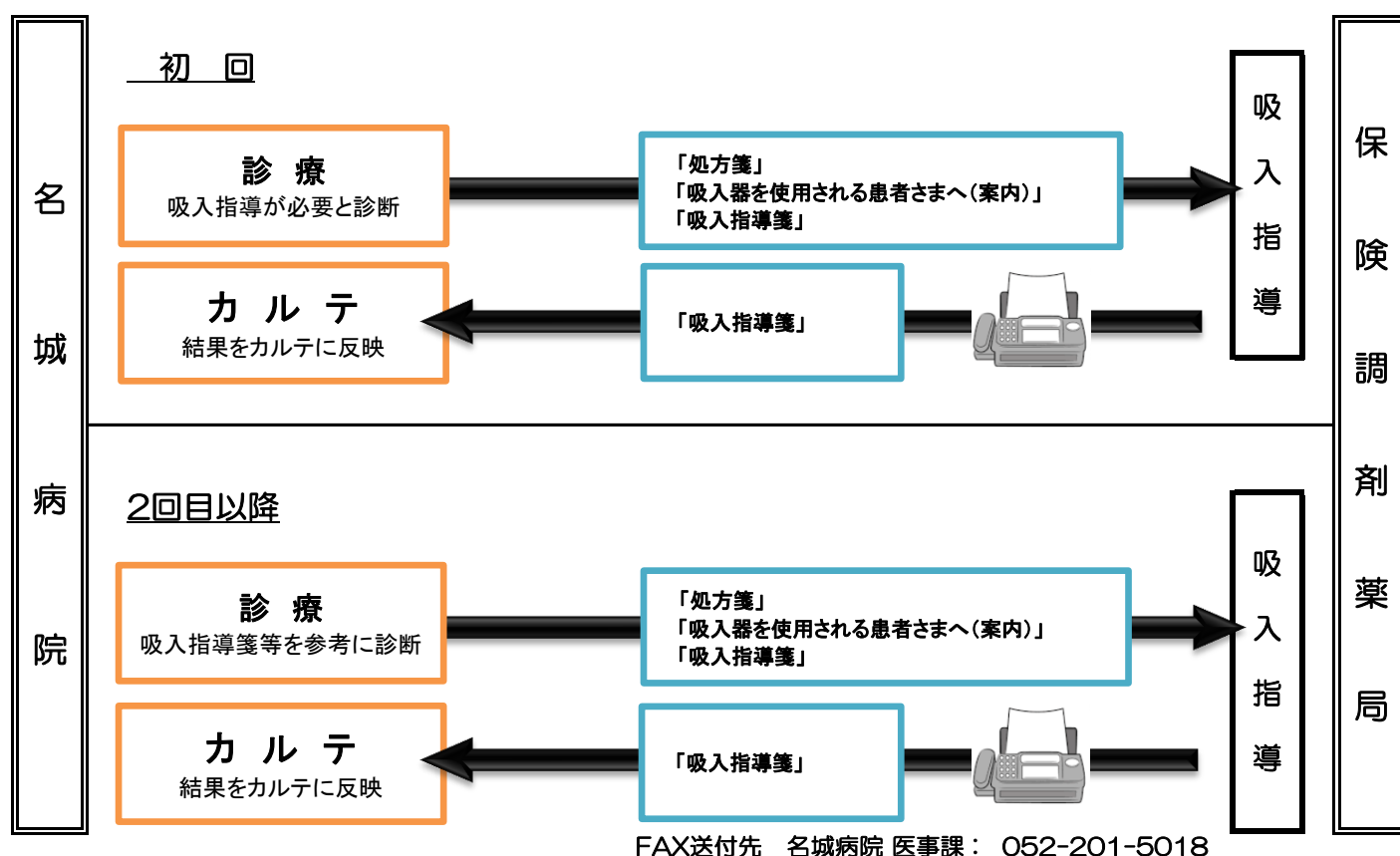


### < 初回 >

- ① 医師は、吸入指導が必要と判断した患者に対し、吸入指導の重要性、吸入指導の連携について説明し同意を得る。「処方箋」を発行、「吸入器を使用される患者さまへ」「吸入指導箋」を印刷・作成し、患者に交付する。
- ② 患者は、「処方箋」「吸入器を使用される患者さまへ」「吸入指導箋」を保険調剤薬局に提出する。
- ③ 保険調剤薬局は、患者さんが持参した「吸入指導箋」の内容を確認、練習用吸入器・トレーナーなどを利用薬剤師がデバイス操作方法を説明し、指導チェック項目に従い吸入指導を行い患者の手技・理解度を評価する。「吸入指導箋」に必要事項を記載後、「吸入指導箋」を当院 医事課までFAX送信する。
- ④ 評価された「吸入指導箋」は、医事課を経由してカルテへ。
- ⑤ 医師は、次回の診療時「吸入指導箋」の結果等を参考に、診察を行う。

### <2回目以降>

必要に応じて、①～⑤をやり取りを繰り返す。

# 吸入指導箋の構成

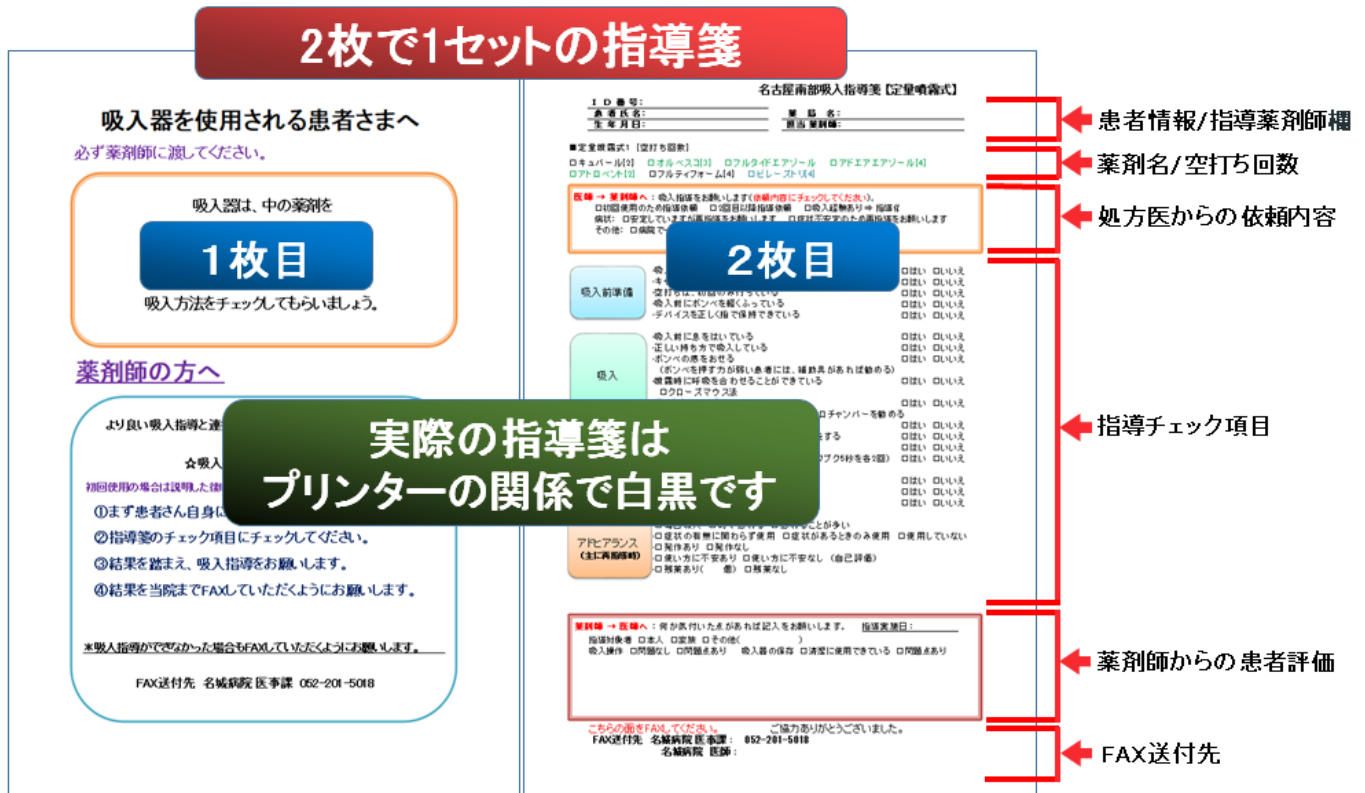

## 他の吸入指導ネットワークと 今回導入する名古屋南部吸入指導箋との違い

### 今回導入の吸入指導箋

指導項目	名古屋南部	つまみ	名市大
吸入後の息止め	5秒 (できれば10秒)	指折り10数える (実質5秒程度)	5秒程度
うがいの指示がある薬剤	ICS(吸入ステロイド薬)以外は 「理解力が良好な患者には、 うがいを省略」	全て	全て
うがいの回数	ガラガラ5秒 ブクブク5秒を 各2回	ガラガラ5秒 ブクブク5秒を 各2回	ガラガラ5秒 ブクブク5秒を 各2回
pMDI (定量噴霧吸入器) の吸入方法	クローズド 「うまく吸入できない患者や小児には、 エアロチャンバーを勧める」	クローズド (可能であればオープン)	クローズド

## 参考：当院のサポートツール一覧 (定量型噴霧式吸入器)

製品名	容器見本・練習用吸入器	残量確認方法	その他	製薬会社
キュバール エアソール	キュバールエアソール吸入練習用 (有効成分含まれない)	キュバール残量計 (量スケくん)	<ul style="list-style-type: none"> <li>患者指導用下敷き</li> <li>キュバール投薬時 アダプター貼付シール</li> <li>患者指導用下敷き</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	大日本住友 くすり情報センター 0120-03-4389
サルタノール インヘラー	吸入練習用エアソール (有効成分含まれない) ※サルタノール専用ではない (筒短め)	(製造していない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘラーエイド (噴霧補助器具)</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	GSK 加味・ワビター 0120-561-007
メプチン 에어	メプチン エア 練習用 (有効成分含まれない)	カウンター 有	<ul style="list-style-type: none"> <li>噴霧補助器具 (拡大レンズ付き)</li> <li>カウンター用拡大鏡</li> <li>患者指導用下敷き</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	大塚製薬 医薬情報センター 0120-189-840
ビレーストリ エアロスフィア	<ul style="list-style-type: none"> <li>エアロスフィア56吸入容器見本 (練習用：薬剤・エア入っていない)</li> <li>薬剤見本 (有効成分 含む)</li> </ul>	カウンター 有	<ul style="list-style-type: none"> <li>フッシュサポーター (拡大レンズ付き)</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	アストラゼネカ 学術 0120-189-115
スピーバ スピオルト	<ul style="list-style-type: none"> <li>レスピマット操作練習用キット (有効成分は含まれない。 ※吸入は推奨されない。)</li> </ul>	(製造していない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸入速度チェックキット</li> <li>回転くん (回転補助器具)</li> <li>吸入操作シール</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	ベーリンガー 資材Webオーダー <a href="http://www.bii-kusuri.jp/">http://www.bii-kusuri.jp/</a> 又は 担当MRへ

## 参考：当院のサポートツール一覧 (ドライパウダー吸入器)

デバイス	製品名	容器見本・練習用吸入器	トレーナー(笛)	その他	製薬会社
ディスクス	アドエア	ディスクス吸入練習用 (乳糖入り)	ディスクストレーナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクス拡大レンズ</li> <li>患者指導用下敷き</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	GSK 加味・ワビター 0120-561-007
エリプタ	レルベア アノーロ テリルジー	エリプタ吸入練習用 (乳糖入り)	エリプタトレーナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>患者指導用下敷き</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	
タービュヘイラー	バルミコート	(製造していない) トレーナーで対応、又は シムピコートの容器見本で対応	バルミコート タービュテスター	<ul style="list-style-type: none"> <li>ぜんそく治療サポートバック (タービュヘイラーの使用 方法とハンカチのセット)</li> <li>操作方法シール</li> <li>残量確認シール</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	アストラゼネカ 学術 0120-189-115
	シムピコート	容器見本 (乳糖なし)	タービュテスター	<ul style="list-style-type: none"> <li>グリップサポーター</li> <li>吸入操作シール</li> <li>吸入確認用ハンカチ</li> <li>吸入指導用下敷き</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	
ブリーズヘラー	オンプレス	インストラクションセット (吸入器と乳糖入りカプセルのセット)	(製造していない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>患者説明用下敷き</li> <li>吸入指導動画DVD</li> <li>患者用指導せん</li> </ul>	ノバルティス バネイザル 0120-965-101
	ウルティプロ シープリ	吸入器 乳糖入りカプセル			
ハンディヘラー	スピーバ 吸入用カプセル	ハンディヘラー吸入練習用 (吸入器と乳糖入りカプセルのセット)	(製造していない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>患者用指導せん</li> </ul>	ベーリンガー 資材Webオーダー <a href="http://www.bii-kusuri.jp/">http://www.bii-kusuri.jp/</a> 又は 担当MRへ

# アムコ エアロチャンバープラス 【有料】



## ●使用方法

- 1** エアロチャンバーが正しく組み立てられている事、異物が混入していない事、損傷や部品の欠落がない事を確認します。


- 2** MDIのキャップを取り外します。使用前にMDIの添付文書を必ずお読みください。


- 3** MDIの容器をよく振り、中の薬剤をよく混和させます。


- 4** 容器をエアロチャンバーのMDI接続部にはめ込み、しっかりマスクを顔にあて、空気が漏れないようにします。


- 5** MDIを押し下げ、ゆっくりと吸入を始めます。


- 6** 次の吸入まではMDIの説明書に従って間隔を開けます。医師の指示に基づき、定められた回数だけ3〜6を繰り返します。



※詳細は添付文書をご参照下さい。

		対象年齢	価格(税抜)	備考
●マウスピースタイプ	大人用	5才〜	1950円	当院売店に1個在庫あります。 ・当院売店で <b>受注発注</b> ・注文納品まで <b>1週間程度</b> かかります
	キッズ用	5才〜	1950円	
●マスクタイプ	大人用ラージ	5才〜	3800円	
	大人用スモール	5才〜	3800円	
	小児用	1〜5才	3300円	
	乳児用	0〜18ヵ月	3300円	

エアロチャンバープラス指導箋より引用